

## CHIRURGENSTUHL ak 480

### FUNKTIONEN

- Chirurgenstuhl, elektrisch höhenverstellbar, mit einer Vielzahl an sinnvollen und ergonomisch wertvollen Optionen. Alle Standardfunktionen oder zusätzliche Optionen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Eingriffen, sowie eine ergonomische günstige Sitzhaltung des Operateurs ohne nachteilige Langzeitschäden.





## SURGEON CHAIR ak 480

### FEATURES

- Surgeon chair, electric height adjustable, offering a number of sensible and ergonomically valuable options. All standard functions or additional options have been designed to support a fatigue free seating posture of the surgeon preventing any long term strains due to improper seating positions.

### STANDARDVERSION

- Elektrische Höhenverstellung mit Fersen bedienten Fußschaltern
- Doppel- Leichtlaufrollen mit zentraler Fußbremse
- Sitzflächenkipfung um ca. 12°

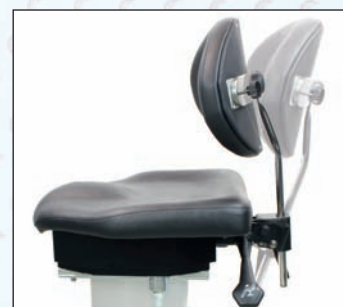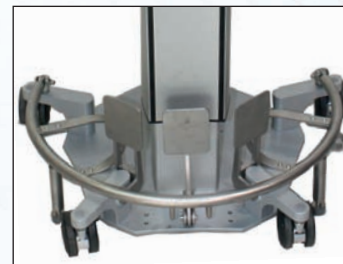


- Die höhenverstellbare Rückenlehne ist federnd oder feststellbar.

### STANDARD-VERSION

- Electrically height adjustable by heel kicked foot switches
- Heavy duty dual castors , lockable by one foot heel kick
- Seat cushion tilt by approx. 12°

- The height adjustable back rest is spring loaded, but also lockable in position.

### OPTIONEN

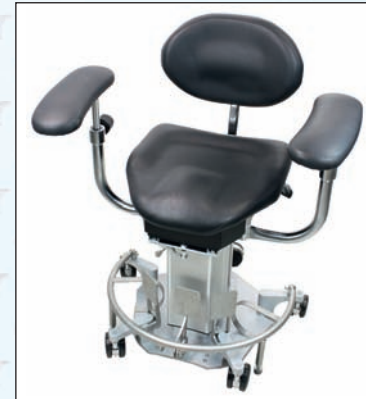

#### STANDARDARMLEHNE

- Die Standardarmlehne lässt sich in der Höhe verstellen und rotiert.

#### ARM REST STANDARD

- The standard arm rest features height adjustment and rotation.



#### SITZFLÄCHEN-VERSCHIEBUNG

- Das Stuhloberteil lässt sich über eine Fußauslösung 150 mm vorwärts – rückwärts bewegen.

#### LUMBAR STÜTZE

- Der Winkel der beweglichen, seitlichen Wangen lässt sich verstellen.

### OPTIONES



#### ARMLEHNE UNTERBÜGEL ROTIEREN

- Lower brackets of arm rests pivot



#### MEHRGELENKS-ARMLEHNE

- Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich auf einem Kugelgelenk in jede gewünschte Position kippen und rotieren...  
...und auf einer Schiene vor und zurück schieben

#### MULTI ARTICULATED ARM REST

- The height adjustable arm rests pivot and tilt to any desired position on a ball joint...  
...the pads also slide fwd – bwd on a rail



#### SEAT CUSHION SHIFT

- The upper part of the chair moves 150 mm fwd – bwd, conveniently controlled by a foot release lever



#### LUMBAR SUPPORT

- The angle of the moving lateral wings is adjustable.



# Chirurgenstuhl ak 480

## Surgeon Chair ak 480



Technische Daten	Technical Data	Wert/Value	EH
Basisfläche B X T	Base area W X L	620 x 680	mm
Stuhlgewicht	Weight chair	55	kg
Durchmesser Doppelrollen	Diameter dual castors	75	mm
Höhenverstellung	Height adjustment	550 x 720	mm
Durchmesser Sitzfläche	Diameter seat cushion	420 x 420	mm
Dicke Polster	Thickness cushion	80	mm
Höhenverstellung Armlehnen	Height adjustment arm	140-290	mm
Max. Benutzergewicht	Max. user weight	250	kg

Funktion	Feature	Standard	Option
Höhenverstellung elektrisch	Height adjustment electric	X	
Armlehnen Unterbügel schwingend	lower support arm for arm rest pivoting	X	
Sitzflächen Kippung ca. 12°	Seat cushion tilt approx. 12°	X	
Schwerlastrollen	Heavy duty dual castors	X	
Zentrale Feststellbremse	One kick locking system	X	
Sitzflächen Verschiebung 150 mm	Seat movement fwd – bwd 150 mm		X
Armlehnen	Arm rests		
Standard Version	Standard Version		X
Mehrgelenks Armlehnen	Multi articulated arm rests		X
IDI Einstellung	IDI release		X
Rückenlehne	Back rest		
Rückenlehne verstellbar	Back rest tilt	X	
Lumbar Stütze einstellbar	Lumbar support adjustable		X

